



- Apertura semplice ed intuitiva.
- Linguetta adesiva sul retro per appendere la confezione a una qualsiasi superficie asciutta e pulita.
- Attivazione istantanea - soluzione salina sterile inclusa: una leggera pressione ed è pronto per l'uso.
- Grip scorrevole per l'inserimento del catetere. Sterile, facilita la presa e il controllo della manovra ed evita di toccare il catetere con le dita.

Privo di PVC, ftalati e lattice.



Tutti i cateteri LoFric sono rivestiti con l'esclusiva Urotonic Surface Technology. In questo modo il catetere resta liscio e sicuro sia durante l'inserimento sia durante l'estrazione.

- Fori atraumatici per un miglior comfort.



Ripiegabile e discreto, in formato tascabile.



Scatola semplice e discreta

Uso previsto

LoFric® Origo™ è un catetere idrofilico monouso per il cateterismo intermittente.

Sterilizzazione e periodo di validità

Tutti i cateteri sono sterilizzati per irradiazione. Le informazioni relative alla durata del prodotto sono stampate sulla confezione.

Confezionamento

30 cateteri per scatola e 4 scatole per confezione di spedizione.

Composizione (materiale)

Rivestimento della superficie idrofilica: polivinil pirrolidone (PVP).

Corpo del catetere: elastomero a base poliolefinica (POBE).

Sacchetto per attivazione: foglio laminato di polietilene tereftalato (PET), alluminio e polietilene (PE). Soluzione salina sterile con cloruro di sodio (NaCl).

Confezione singola: foglio superiore in laminato di polietilene tereftalato (PET) e polietilene (PE). Foglio inferiore: poliolefina.

Gamma di prodotti

Codice prodotto	Punta	Lunghezza	Misura
442 08 30	LoFric® Origo™ Nelaton	30 cm	CH 08
442 10 30	LoFric® Origo™ Nelaton	30 cm	CH 10
442 12 30	LoFric® Origo™ Nelaton	30 cm	CH 12
443 10 30	LoFric® Origo™ Nelaton	40 cm	CH 10
443 12 30	LoFric® Origo™ Nelaton	40 cm	CH 12
443 14 30	LoFric® Origo™ Nelaton	40 cm	CH 14
443 16 30	LoFric® Origo™ Nelaton	40 cm	CH 16
443 18 30	LoFric® Origo™ Nelaton	40 cm	CH 18
444 10 30	LoFric® Origo™ Tiemann	40 cm	CH 10
444 12 30	LoFric® Origo™ Tiemann	40 cm	CH 12
444 14 30	LoFric® Origo™ Tiemann	40 cm	CH 14
444 16 30	LoFric® Origo™ Tiemann	40 cm	CH 16
444 18 30	LoFric® Origo™ Tiemann	40 cm	CH 18

LoFric® Origo™

Istruzioni

Informazioni importanti


Addestrare opportunamente l'utilizzatore all'uso del catetere.

Prima di cominciare, lavare le mani con acqua e sapone.


Questo è un prodotto monouso. Dopo l'uso, il rivestimento superficiale si deteriora e il catetere non è più sterile. Per attivare il catetere, utilizzare solo la soluzione salina inclusa.




1. Premere delicatamente per rilasciare la soluzione salina e il catetere è pronto all'uso.

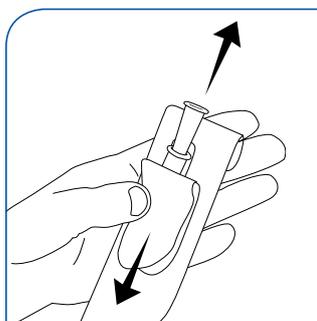

2. Per aprire, tirare la linguetta adesiva verso il basso.

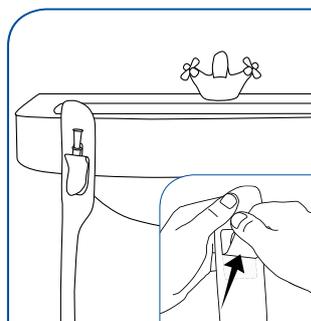


3. È possibile appendere il prodotto utilizzando l'etichetta adesiva posta sul retro della confezione, se necessario.

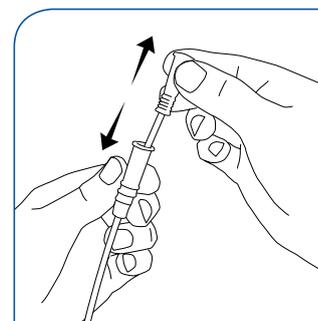

4. Far scorrere il Grip sterile posizionato sul connettore per un maggior controllo senza toccare direttamente il catetere.

Opzioni

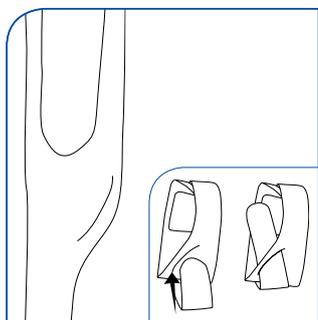

A. Ripiegare la confezione e utilizzare l'asola posta sul lato per mantenere il catetere ripiegato.

Descrizione del prodotto

LoFric Elle è un catetere urinario idrofilico progettato per utilizzatrici donne.

Uso previsto

Catetere urinario femminile monouso progettato per cateterismo urinario intermittente.

Sterilizzazione e periodo di validità

Sterilizzato per irradiazione. Le informazioni sul periodo di validità sono riportate sulla confezione.

Confezionamento

Confezione singola. 30 cateteri per scatola. 2 scatole per confezione di spedizione.

Gamma di prodotti

Descrizione	Tipo	Lunghezza	Dimensioni
418 12 30	LoFric Elle™ Nelaton	10 cm	CH 12
418 14 30	LoFric Elle™ Nelaton	10 cm	CH 14

Composizione del materiale

Materiale del catetere:
Elastomero poliolefinico (POBE).


Rivestimento superficiale:
Polivinilpirrolidone (PVP).

Liquido:
Soluzione a base di acqua con glicerolo.

Materiale del confezionamento primario:
Polipropilene.



Scatola dispenser di facile utilizzo

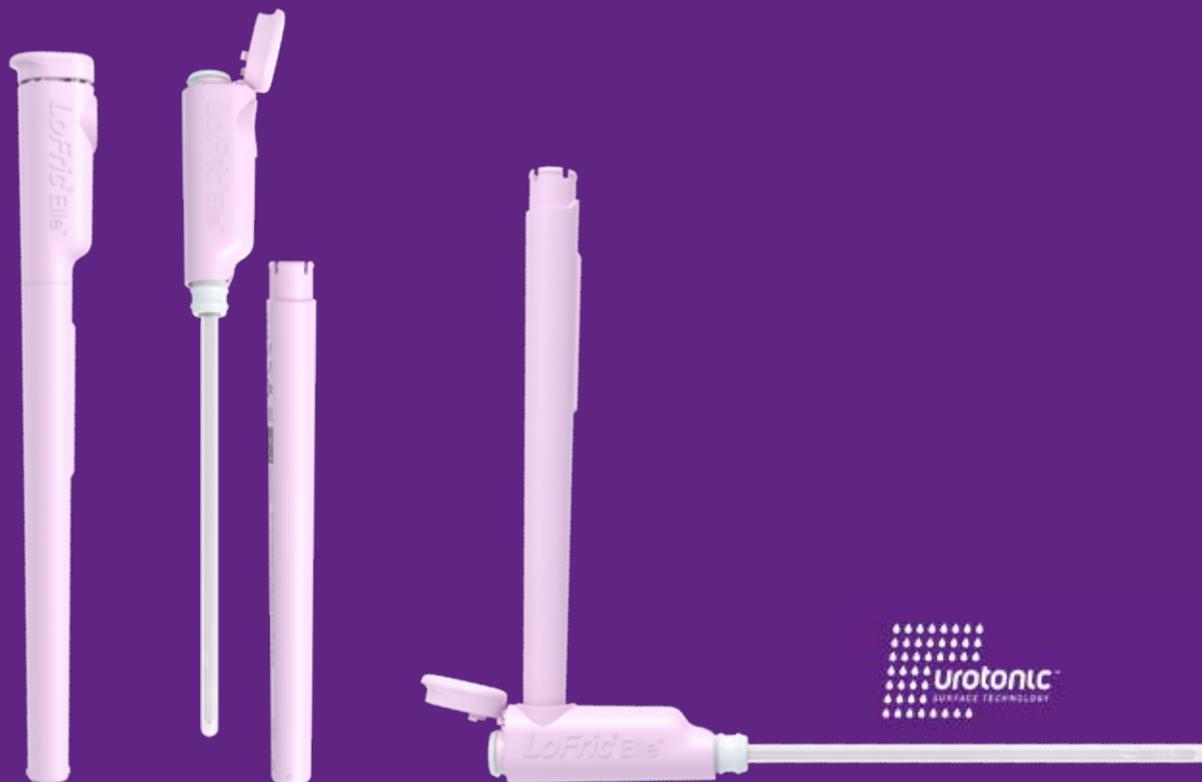

- Progettato per essere intuitivo, grazie all'impugnatura ergonomica - per una buona presa e tecnica no-touch. Si collega ad una sacca di raccolta standard o ad una prolunga standard.
- Pronto all'uso: pronto al bisogno per garantire un rapido utilizzo del catetere e ottimizzare i tempi della procedura del cateterismo.
- Design sottile e discreto
- Il contenitore inferiore è riciclabile come plastica (polipropilene)
- Fabbricato senza PVC, ftalati e lattice.
- Tutti i cateteri LoFric sono rivestiti con l'esclusiva Urotonic™ Surface Technology. Questo garantisce che il catetere sia sempre confortevole e sicuro, sia durante l'inserimento che durante l'estrazione.



LoFric® Elle™


Istruzioni

Informazioni importanti

Assicurarsi che all'utilizzatrice venga fornita una adeguata formazione sulla procedura del cateterismo.

Prima di cominciare, lavare le mani con acqua e sapone.

Questo è un prodotto monouso. Dopo l'utilizzo, il rivestimento superficiale si deteriora e il catetere non è più sterile.

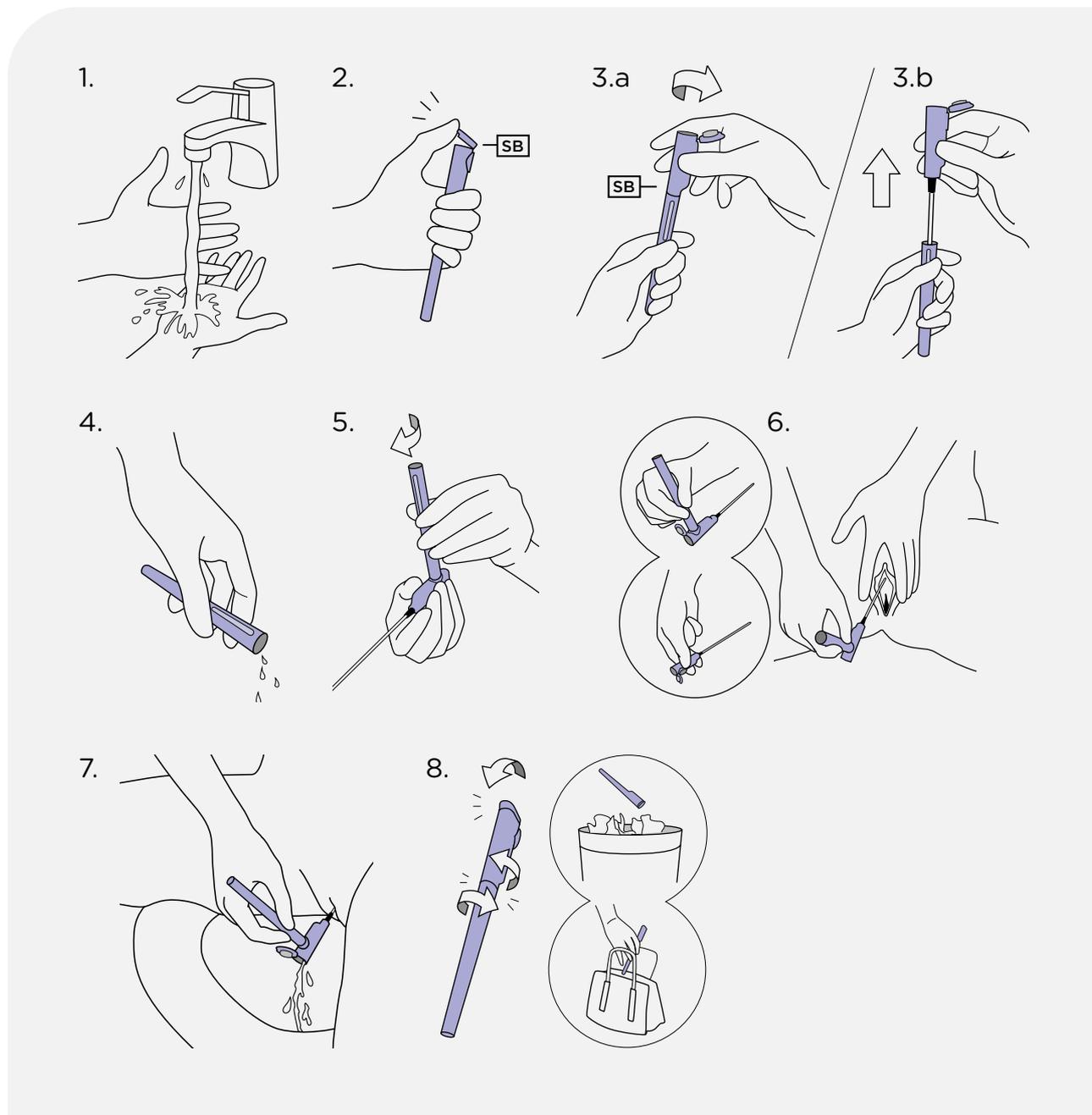

LIBERA L'INTESTINO, LIBERA LA VITA

Wellspect®
A REAL DIFFERENCE



Sistemi Navina Smart - ricambi

Codice	Tipo	Contenuto	Limite di utilizzo
69003	Set di ricambio Regular	1 sacca per l'acqua 15 cateteri rettali Regular*	1,5 litri, ripiegabile, scala doppia Catetere idrofilico monouso
69004	Set di ricambio Small	1 sacca per l'acqua 15 cateteri rettali Small	1,5 litri, ripiegabile, scala doppia Catetere idrofilico monouso
69016	Set di ricambio con cono	1 sacca per l'acqua 15 coni	1,5 litri, ripiegabile, scala doppia Catetere idrofilico monouso
68940	Set di cateteri rettali Regular*	10 cateteri	Catetere idrofilico monouso
68943	Set di cateteri rettali Small	10 cateteri	Catetere idrofilico monouso
69011	Set di tubi	1 tubo del catetere/cono 1 tubo della sacca per l'acqua	100 utilizzi 100 utilizzi
69012	Set di accessori	2 anelli di presa (1 verticale, 1 orizzontale) 1 cordoncino da collo 1 cinghia di posizionamento 1 gancio di posizionamento Navina Smart	

* Solo per adulti

Tutti i componenti dei sistemi Navina devono essere eliminati come rifiuti domestici.

Contattare l'ufficio competente del comune di residenza per seguire la procedura corretta di smaltimento.

wellspect.it



Navina Smart Informazioni di prodotto

I Navina™ Systems di Wellspect HealthCare sono concepiti per aiutare gli adulti e i bambini a partire da 3 anni che soffrono di incontinenza fecale, costipazione cronica e/o necessitano di lunghe procedure di gestione intestinale.

I pazienti a cui sono destinati possono essere in carrozzina e/o presentare manualità compromessa. Instillando acqua nella parte inferiore del colon è possibile favorire la peristalsi e, di conseguenza, l'evacuazione del colon e del retto. I bambini possono essere accompagnati da una persona adulta che presti assistenza fino a quando giudica che il bambino sia in grado di effettuare autonomamente la procedura.

- Prima di utilizzare i Navina Systems, consultare sempre un professionista sanitario specializzato in irrigazione transanale (TAI).
- Utilizzare i Navina Systems unicamente per lo scopo previsto, come descritto nel manuale di istruzioni.
- I Navina Systems sono esclusivamente monopaziente e non devono essere condivisi con altri.
- Il catetere Navina regular è solo per l'uso da parte degli adulti.
- Il catetere Navina small deve essere utilizzato solo insieme all'unità di controllo Navina interamente bianca.

Controindicazioni

I Navina™ Systems NON devono essere utilizzati in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- Stenosi anale o rettale nota.
- Malattia infiammatoria intestinale attiva.
- Diverticolite acuta.
- Cancro coloretale.
- Colite ischemica.
- Nei tre mesi successivi a un intervento chirurgico nella zona anale o coloretale.
- Nelle 4 settimane successive a una polipectomia endoscopica.

Dato che l'elenco potrebbe non essere completo, i professionisti sanitari dovranno considerare sempre anche il quadro personale specifico dell'utilizzatore.

Sistemi Navina Smart

Codice	Tipo	Contenuto
69009	Sistema Navina Smart Regular Indicato per adulti	1 unità di controllo di Navina Smart 1 sacca per l'acqua 1 set di tubi 2 cateteri rettali regular 1 custodia Navina 1 set di accessori
69010	Sistema Navina Smart Small Indicato a partire da 3 anni	1 unità di controllo di Navina Smart 1 sacca per l'acqua 1 set di tubi 2 cateteri rettali Small 1 custodia Navina 1 set di accessori
69019	Sistema Navina Smart con cono Indicato a partire da 3 anni	1 unità di controllo di Navina Smart 1 sacca per l'acqua 1 set di tubi 2 coni 1 custodia Navina 1 set di accessori